

毫升蠕动泵 HSP3000

微量灌装 高精度 | 高效率 | 长寿命 | 易清洁

毫升蠕动泵 HSP3000

雷弗HSP3000系列产品主要用于各类不同性质、不同粘度液体的高精度灌装，装量范围25 μ L~3mL，具有准确性高、重复精度高、效率高、洁净度高、操作简单及维护方便的优点，可手动亦可自动操作。

应用领域：生物制药、食品工业等领域

典型应用：适用于 磁珠液、甘油、甘油血清、甘油乙醇、甘油石蜡油、甘油Mix试剂、甘油蛋白酶k、细胞裂解液、尿素等微量灌装



功能特点

- 灌装精准度高，误差可小于±2%；
- 模块化设计，可多台泵级联，组成多通道灌装系统；
- 人机界面友好，直接输入液量参数即可，操作简单；
- ★ 特殊机械结构设计，达到精度、效率、稳定性的完美结合；
- ★ 灌装效率可达2瓶/秒；
- 高精度伺服电机驱动，大扭矩，免维护；
- 体积小巧，弹簧式压管结构，工作效率高；
- 有回吸功能，零滴落；可即时停机；
- ★ 纳米级灌注针头，具有疏水性，实现零挂液；
- 泵管拆卸方便，利于清洗灭菌，支持CIP和SIP；
- ★ 泵管损耗小，连续使用寿命可达1000小时，12小时装量衰减 < 1%，维护简单；
- 既可手动操作，也可以配套自动生产线使用。

技术参数

技术参数	HSP3000
灌装量	25μL~3000μL
灌装精度	±2%
通道数	最多支持16台设备级联
灌装时间	0.01~999.99S
间隔时间	0.40~3600S
循环次数	1~10000次，0表示无限循环
泵管规格	内径0.5~4.8mm
显示操作	7英寸高清彩色触摸屏
外控信号	启动信号输入（干触点），分配中信号输出（开漏弱上拉）
外壳材质	铝合金
液路最大承压参考值	0.15Mpa
适用电源	AC 100~240V 50~60 Hz
功率	单通道35W
工作环境	环境温度0 ~ 40℃，相对湿度<80%
防护等级	IP31
控制器重量	1.5kg
驱动器重量	3.2kg

特性对比

与传统蠕动泵对比

	微升蠕动泵	传统蠕动泵
灌装精度	灌装最小25μL，精度误差小于±2%	不适合100μl以下的灌装,200μL误差<±3μL
灌装效率	产量达120瓶/分钟	产量 < 40瓶/分钟
装量衰减	连续运行12小时，衰减 < 1%；工作一天无需校准	连续运行12小时，衰减 > 5%；通常2个小时需校准一次
泵管寿命	连续运行，寿命 > 1000小时	连续运行，使用寿命在70~100小时
分装特性	特殊机械结构和管路套件的完美配合，实现零挂液	传统结构，针头易挂液

与陶瓷柱塞泵对比

	毫升蠕动泵	陶瓷柱塞泵
洁净卫生	无死体积，无积液，物料只与洁净管路接触，无污染	有死体积，有积液，物料与泵头内腔接触，清洁不彻底
易用性	灌装不同物料，只需更换管路，避免交叉污染，维护简单，成本低	一台泵只能灌装一种物料，维护复杂
通用性	物料中可含磁珠等微粒	物料必须洁净，不能有杂质
装量范围	单机25μl~3000μl	单机0.3~100ml、0.5~500ml
针头滴落	可回抽，无滴落	易产生滴落
腔体脱落	挤压强度低，无机械摩擦，腔体内壁光滑无脱落物	机械连续摩擦，腔体易脱落微粒


灌装精度及效率

灌装量	灌装时间	精度误差	12小时衰减率
25μL	0.1-0.24s	<±1.5%	<1%
50μL	0.25-0.48s	<±2%	<1%
100μL	0.22-0.41s	<±1%	<1%
200μL	0.28-0.50s	<±1.5%	<1%
300μL	0.21-0.33s	<±1.5%	<1%
500μL	0.2-0.3s	<±1.5%	<1%
800μL	0.19-0.28s	<±2%	<1%
1mL	0.4-0.6s	<±1%	<1%
2ml	0.44-0.7s	<±2%	<1%
3mL	0.9-1.1s	<±1.5%	<1%

- 1.以上数据测试条件：
在常温，常压下，液位不变，使用硅胶软管传输水，进口端1米，出口端1米；以上所有称量数据全部采用赛多利斯十万之一高精度天平测量得出。
- 2.分装误差和精度数据采用连续测量50组数据得出，本数据不包含最后一滴的影响。
- 3.12小时衰减率：
在产量60瓶/分钟条件下，安装调试好设备后，先运行3小时，开始每隔12小时记录10组分装数据，连续运行5天，取最大值。
- 4.分装过程中，液体内溶解气体的析出等问题会产生气泡，对1000μl以下分装精度影响较大，在使用过程中需注意消泡处理。
- 5.此表数据的解释权归雷弗所有，详情请咨询雷弗技术工程师。


外形尺寸

单位：mm

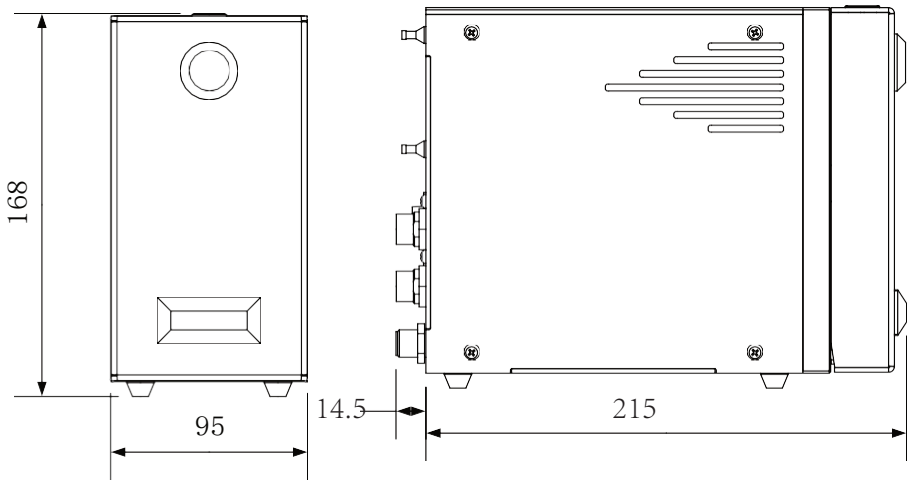

控制器尺寸

单位：mm

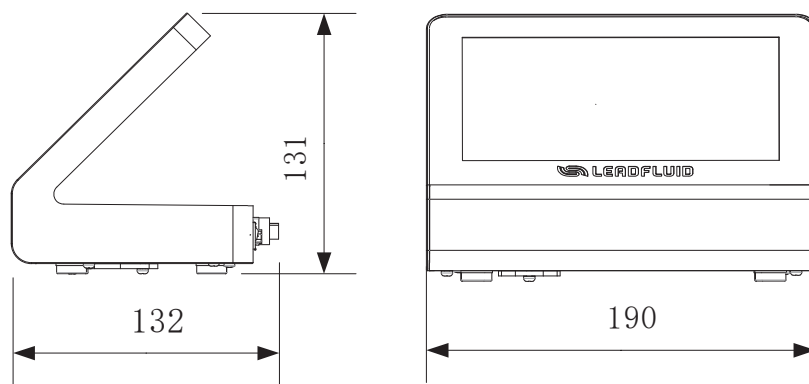

声明：我们相信本资料所包含的信息是准确无误的，雷弗对其中的任何错误不承担责任，雷弗保留在不经事先通知的情况下随时修改和增删本资料的权利。



雷弗流体(保定)智能设备制造有限公司

地址：河北省保定市徐水区徐水经济开发区阳光大街装备制造东园1号-11

电话：400-618-0877

邮箱：master@leadfluid.com

网址：www.leadfluid.com.cn