

CT3001F精密齿轮泵

CT3001F精密齿轮泵



CT3001F采用伺服无刷电机驱动，高性能，低噪音，不锈钢磁驱动泵头，可实现无脉动，恒流速的流体控制。彩色液晶显示，触摸屏操作，可轻松设置参数。多种工作模式可选，流量显示，适用于各种实验领域。多种外控方式，方便与其他设备配合使用，支持Modbus通讯协议，简化系统开发的难度。

应用领域：实验室、工业、食品、化工等领域

典型应用：高粘度液体传输、化妆品、反应釜

功能特点

- 可安装多种泵头；
- 适合传输较粘稠，高压力的液体；
- 无脉动传送，低噪音；
- 磁力耦合设计，便于维护；
- 伺服无刷驱动，高效率，高精度，免维护；
- 彩色液晶显示，触摸屏操作；
- LF-Touch-OS软件系统；
- 流量显示，流量控制；
- 多种工作模式；
- 流量校正向导，保证液量的精度；
- 智能温控功能；
- 外控信号控制，物理隔离，模拟量调速；
- RS485通讯，兼容Modbus协议；
- 宽范围电源输入，适应不同环境。

技术参数


技术参数	CT3001F
流量范围	15~2700 mL/min
转速范围	50~3000rpm
转速分辨率	1rpm，精度误差 < ±0.5
工作模式	流量模式，时间分配，液量分配，复制分配
分装时间	0.1 ~ 999秒
间隔时间	0.1 ~ 999秒
分配时间	0-999次
传输液体颗粒限制	颗粒直径≤10μm（建议前置过滤器）
传输液体粘度	≤200cSt
模拟量输入信号	0 ~ 5V（标配），0 ~ 10V、4 ~ 20mA(选配)
转速输出信号	0 ~ 5V
外控信号	5V、12V（标配），24V（选配）
通讯接口	RS485通讯，兼容Modbus协议
电源电压	AC100~240V，50/60Hz
功率	<50W
防护等级	IP31
工作环境	工作温度5 ~ 40℃，相对湿度 < 80%
外形尺寸（长×宽×高）	343×182×198mm
机箱材质	塑料
驱动器重量	3.5kg

泵头规格与流量参考表

驱动器型号	泵头规格	齿轮材质	转速范围（rpm）	传输压力（Mpa）	流量范围（mL/min）
CT3001F	MG204XD0PT00000	PEEK	50 ~ 3000	≤0.8	15 ~ 900
	MG209XD0PT00000			≤0.8	30 ~ 1800
	MG213XD0PT00000			≤0.3	45 ~ 2700

以上流量数据是在常温常压下打纯净水测试所得，实际使用受压力、介质特性等具体因素影响，仅供参考。

尺寸图（mm）

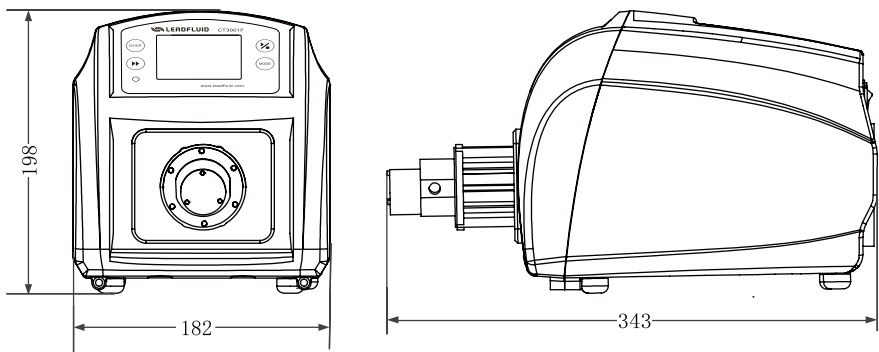

声明：我们相信本资料所包含的信息是准确无误的，雷弗对其中的任何错误不承担责任，雷弗保留在不经事先通知的情况下随时修改和增删本资料的权利。



保定雷弗流体科技有限公司

地点：河北省保定市徐水经济开发区阳光大街装备制造东园1号-11

电话：400-618-0877

传真：0312-3250877-804

邮箱：master@leadfluid.com

网址：www.leadfluid.com.cn